

AURA Polycentric knee




Om produkten

Aura Polycentric Knee är en stabil, polycentrisk knäled som är enkel att använda för både kliniker och patienter. Den ger extra stabilitet och stöd för låg- till medelaktiva användare. ICR (Instant center of rotation)-designen håller rotationscentret bakom belastningslinjen för ökad stabilitet och smidig flexion, samtidigt som knäet förkortas vid böjning för bättre tåfrigång och säkerhet.

Unikt manuellt lås

Den har en unik låsmekanism för enkel låsning/öppning med knapptryck och justeringar av flexion/extension med en 4 mm insexnyckel.

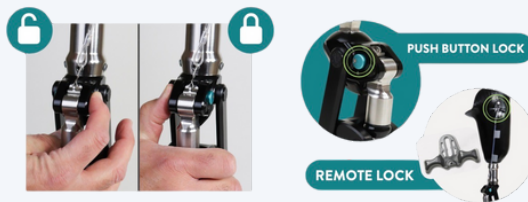

Vattentät

Knäet är korrosionsbeständigt och kan användas i både hav och klorerade pooler.



Egenskaper

-  Söt- och saltvattentålig
-  Unik och mycket enkel lås-funktion
-  Flexion 0-135°
-  Höjd: 161 mm.
-  Vikt: 665g
-  Dome till center knä: 17mm.
-  Max patientvikt: 136kg

Art. nr: 760300-150

